


AcuMark balón na meranie defektov



Výrobca: Lifetech Scientific

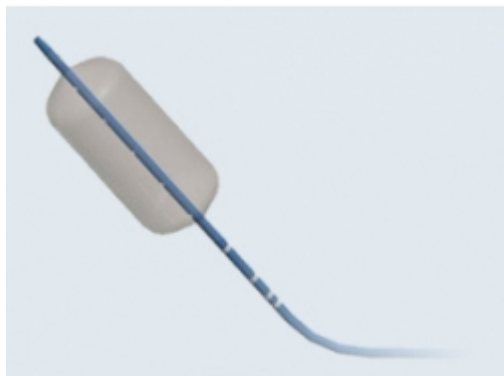

AcuMark balón na meranie defektov

AcuMark balón na meranie je dvoj lúmenový katéter, ktorý je usposobený na meranie kardiovaskulárnych defektov ako napríklad defekt predsieňového septa (ASD). Balón je tvorený z mäkkej TPU plastickej membrány.

Nosný segment balóna je v 45° uhle k tyčke zabezpečujú pravouhlé umiestnenie v relácii k predsieňovému septu. Štyri značky nepriepustné pre žiarenie v 10 mm, 5 mm a 2 mm (merané od prednej hrany) intervaloch slúžia ako referencia vzdialenosti pre spresnenie korekcie.

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991