

AUTO TRAC 460 - Trakčná zostava



Výrobca: gymnauniphy

AUTO TRAC 460 - Trakčná zostava s prístrojom (230333245set)

Prístroj pre kontinuálnu, prerušovanú, progresívnu alebo harmonickú trakciu chrbtice a krku.

Prednosti prístroja

- Možnosť nastavenia trakčnej sily od 1 do 91 kg pre lumbárnu trakciu - zobrazenie v kg
- Možnosť nastavenia trakčnej sily od 1 do 9 kg pre krčnú trakciu - zobrazenie v kg
- Minimálna trakčná sila (pauza) môže byť vopred nastavená
- Časovanie od 0 - 99 minút, zobrazenie zostávajúceho času
- Čas pauzy a trakcie je nastaviteľný od 0 - 99 sekúnd
- Vopred nastavená trakčná sila sa udržiava počas nastavených sekúnd
- Možnosť nastavenia progresívnej a regresívnej fázy trakcie
- Počas liečebnej fázy sa zobrazuje: progresívna fáza - trakcia - regresívna fáza - pauza
- Zobrazenie bezpečnostných prvkov
- CE certifikát
- Kompenzácia trakčnej sily: Počítačom riadená automatická kompenzácia

Technické údaje

Terapeutické formy

kontinuálna, prerušovaná, kontinuálna progresívna a harmonická.

Čas liečby

0 - 99 min

Zvýšenie rýchlosti

nastaviteľné

Trakčná fáza

0 - 99 s

Zníženie rýchlosti

nastaviteľné

Fáza pauzy

0 - 99 s

Trakčná sila vo fáze kľudu

0 - 91 kg

Trakčná sila vo fáze trakcie:

0 - 91 kg

Váha


+/- 13 kg

Sieťové napájanie

240 V, 50 - 60 Hz

Štandardné príslušenstvo

- sieťová šnúra, priame zakončenie
- bezpečnostné tlačítko pre pacienta
- extenčný povraz s háčikmi + popruhy pre lumbálnu časť - **230100459+230100476**
- rám na uchytenie prístroja k lehátku - **230121434**
- flexná podnožka - **230110487**
- stôl s elektrickým nastavením výšky (alebo s hydraulickým nastavením - voliteľné) - **230126112**

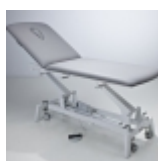

Voliteľné príslušenstvo

- **230100457** Krčný popruh podľa Glissona - koženný, vyplnený penovou gumou (bez závesného ramienka) vybavený nylonovými pásmi, ktorými sa prispôsobuje veľkosť krčného popruhu pacientovi
- **230100458** Závesné ramienko pre Glissonov popruh
- **230100459** Podložky pre krčný popruh, polyesterové , umývateľné-sada
- **230100476** Bedrový pás s Velcro zapínaním
- **230100477** Hrudný pás s Velcro zapínaním
- **230110487** Stolička Flexi - tapacírovanie z polyesteru, pokryté imitáciou kože (farba granit), možnosť nastavenia výšky.

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991