

Cryoflow ICE - CT



Výrobca: gymnauniphy



Prístroj Cryoflow ICE - CT (infrared) má v sebe integrovaný feedback systém na zisťovanie aktuálnej teploty z povrchu kože. Tento systém slúži na zachovanie konštantnej teploty na povrchu liečenej zóny, systém si automaticky nastavuje parametre toku vzduchu. Oproti predchádzajúcim modelom má v sebe integrovaný indikačný zoznam.

Mobilné zariadenie, ktoré generuje studený vzduch do -32 C.

Tok vzduchu je možné nastaviť od 100 do 1000 l/min v 10 krokoch. Aplikuje sa cez izolovanú vzduchovú trubicu s rozličnými aplikátormi, ktoré majú veľkosť 5 mm, 15 mm, 25 mm.

Flexibilná liečebná hadica má dĺžku cca 1,60 m.

Software je niekoľkých jazykoch, liečebné parametre sú zobrazené na displeji.

- Napájanie: 230V, 50Hz
- Váha: 85 kg
- Rozmery: 550 x 365 x 1050 mm
- Záručná doba: 1 rok
- Liečebné hlavice: priemer 5 mm, 15 mm a 25 mm

Liečba pomocou kryoterapie - výhody:

Krátka doba liečby, dlhodobý efekt.


Liečebné účinky kryoterapie:

Zmenšenie zápalu, jasný protibolestivý účinok, zmenšenie vývoja poúrazových a pooperačných opuchov a zlepšenie pohybového systému

Fyziologické efekty:

- analgetický
- antizápalový
- antiedemický
- antispastický
- stimulácia krvného obehu
- redukcia nervovej vodivosti

V opcii je možné zakúpiť ramenný držiak na hadicu.

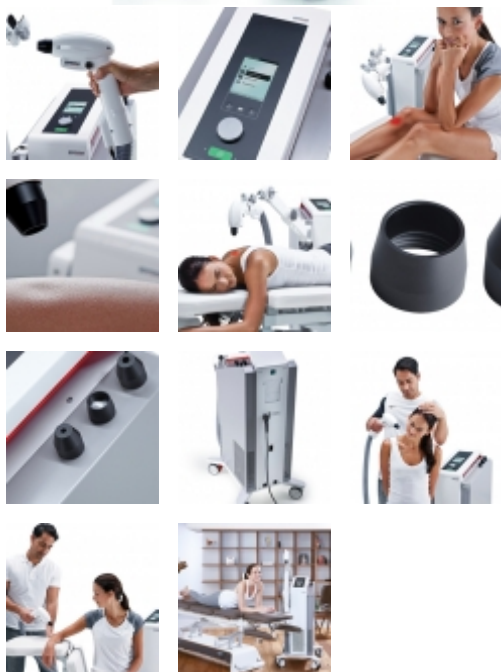

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991