


Mobilné

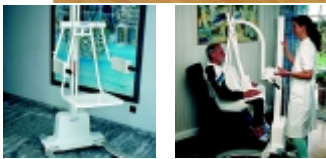

Výrobca: trautwein

Zdvíhacie zariadenie typ Elli 700 a 1000

Zdvíhacie zariadenie model Elli typ 700 a 1000 s vymeniteľným lehátkom a sedadlom.

Zariadenie je dimenzované pre maximálnu záťaž 150 kg.

Na kolieskach, z toho dve predné s priemerom 75mm, a zadné 100mm s brzdou. Kolieska majú plastovú ochranu. Zdvíhacie zariadenie - elektromechanický zdvíhací systém s možnosťou nastavenia pomocou elektronického spínača,

Vhodné pre všetky typy vaní. Diaľkové ovládanie s magnetickým držiakom, kapacita batérie 9,5Ah. Batéria je bezúdržbová, s ochranou proti vybitiu. Týždenne sú potrebné 1 až 2 nabíjacie cykly, pri plnom použití zdvíhacieho zariadenia. Integrovaná nabíjačka s elektronicky riadenou ochranou proti prepätiu. Nabíjanie sa uskutočňuje pomocou spojovacieho kábla. Pri vybití batérie zdvihák začne pracovať pomalšie, neprestane pracovať okamžite. Všetky plastické materiály sú svetlosedé.

Možnosť integrovať digitálnu váhu. Zdvihák je možné dodať so sedadlom, alebo ležadlom, ktoré majú jemné hygienické tapacirovanie. Možnosť pripojenia bezpečnostných pásov pre pacientov, ktorí sa nedokážu dostatočne udržať.

Technické údaje

- Zdvih
700-1000 mm
- Pracovný záber
0 - 700-1000 mm
- 2 batérie sériové
24V 9,5Ah
- Maximálna záťaž
150kg

Zdvíhacie zariadenie typ Sami

Mobilný akumulátorový zdvihák pre uľahčenie vstávania

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991