


California Twin



Výrobca: trautwein

Wellness vaňa pre 2 osoby. (240AW7260)

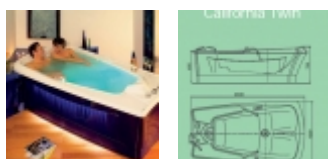

Hydro-terapeutické zariadenie pre regeneráciu tela .

Zariadenie pre podvodnú masáž - voda a vzduch prúdia cez jednokanálový systém a poskytujú tým vibračnú čiastočnú a celo telovú masáž.

Zvuková terapia - vaňa nemá žiaden reproduktor, sama je reproduktorom po pripojení na hi-fi audio systém. Pri kúpaní je na telo pacienta prenášaný osciláciou vody zvuk hudby.

Vnútrotné osvetlenie vane LED diódami.

Ergonomicky upravené vnútro vane pre pohodlné sedenie aj ležanie.

- Obsah vane: 330 l
- Vonkajší rozmer: d x š x v 2300 x 1300 x 650/750 mm
- Napájanie: 230 V, 50 Hz, 2,3 kW
- Výkon pumpy: 400 l/min
- Počet trysiek : 120
- Počet tryskových kanálov: 6
- Počet ošetrovacích zón: 4
- Automatické plnenie: štandardne
- Farebné podsvietenie: štandardne
- Reprodukory: štandardne
- Zariadenie na privolanie pomoci: opcia

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991