


Cera VSD oklúдеры

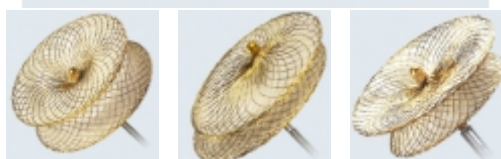

Výrobca: Lifetech Scientific

- Cera VSD oklúder muskulárny
- Cera VSD oklúder symetrický
- Cera VSD oklúder asymetrický
- Cera VSD oklúder excentrický

Cera VSD oklúдеры sú perkútanne a transkatetrálne produkty určené na nechirurgické uzatváranie defektov komorového septa. Cera VSD oklúдеры sú samo rozťahovacie dvojdiskové produkty, vytvorené zo siete nitinolových drôtov. Dva disky sú spolu spojené s krátkym cylindrickým pásom, ktorý korešponduje s veľkosťou VSD.

Pre zvýšenie schopnosti uzatvorenia defektu a zredukovanie reziduálnych skratov, disky a pás sú vyplnené ePTFE membránami. Nitinolový skelet je pokrytý biologicko-keramickým povrchom pre zlepšenie biokompatibility. Keramické povrchy znižujú elektrochemickú eróziu a koncentráciu iónov niklu v krvi a endokardiu.

Vysoká biokompatibilita biologicko-keramického povrchu napomáha lepšej a rýchlejšej endotelizácii produktu a teda prijatia oklúdera v tele pacienta. Vďaka tejto unikátnej povrchovej štruktúre oklúdera, dochádza k podstatnému zníženiu tvorenia trombov v mieste implantácie oklúdera.

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991