

DIMAP V F4 s 4 samostatnými výstupy A + B + C + D



Výrobca: dimap DIMAP V F4



4x75 programov miesto doterajších 17. Pamäť pri výpadku prúdu uchová všetky nastavenia. Ovládanie modernou bezkontaktnou klávesnicou - vysoká životnosť a spoľahlivosť, výkonný nízkofrekvenčný magnet s reguláciou výkonu - max. indukcie 65mT, 4 nezávislé programové výstupy mg. pole = 4 x 75 programov obsahujúcich celé frekvenčné pásmo do 50 Hz, čas 5-90 min., individuálne alebo spoločné nastavovanie, možnosť meniť parametre v čase aplikácie, možnosť pripojenia rozdvójky, možnosť pripojenia výkonných aplikátorov so zvýšeným výkonom cca o 30%, zrýchlená nábehová doba impulzu 0,5-4 ms (0,35-2,5 ms), systém ochrany proti preťaženiu, skratu, prehriatiu, statickej elektrine, výpadkom siete.


Výkonný toroidný transformátor 820VA so zníženým vyžarovaním a tepelnou ochranou, kontrola pripojených aplikátorov, optická indikácia výstupných pulzov, riadený výkonným mikroprocesorom, akustická a optická signalizácia, pamäť poslednej aplikácie.

Vhodný pre nemocnice, rehabilitácie, LDN, ústavy sociálnej star., domovy dôchodcov, fitness centrá... s veľkým počtom pacientov.

ZSA1 - doporučená sada základných aplikátorov

- **A1H** - plochý univerzálny kruh s priemerom 22 cm a výškou 3 cm. Používa sa na bodové aplikácie (napr. ruku, lakeť, pätu);
- **A2H** s opaskom PF - dvojcievkový ohybný aplikátor. Používa sa na ramená, kolená, kĺby;
- **A3H** - lôžkový štvorcievkový aplikátor s podhlavníkom. Používa sa na oblasť chrbtice, na chrbát;
- **S1H60** - valcový celotelový aplikátor s priemerom 60 cm. Používa sa na telo, kĺby;
- **S2H** - valcový aplikátor s priemerom 30 cm. Používa sa na obidve končatiny napr. kolená, cievky alebo ako detský celotelový.

Výber ďalších aplikátorov nájdete v sekcii klinické aplikátory.

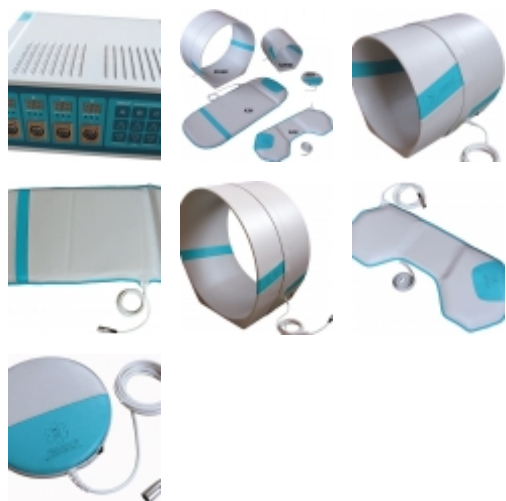

© EGAMED 2012

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č.4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907-10, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

VÚB, a.s., pobočka Piešťany, 86805 – 212/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 8680 5212 SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00613606, DIČ: 2020395201, IČ DPH: SK2020395201

EGAMED, spol. s r.o., Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 1331/T, dňa 21. 3. 1991